


# SYSTEM STROBEL

SONDERUMBAU:  
Hecklift für adipöse Patienten

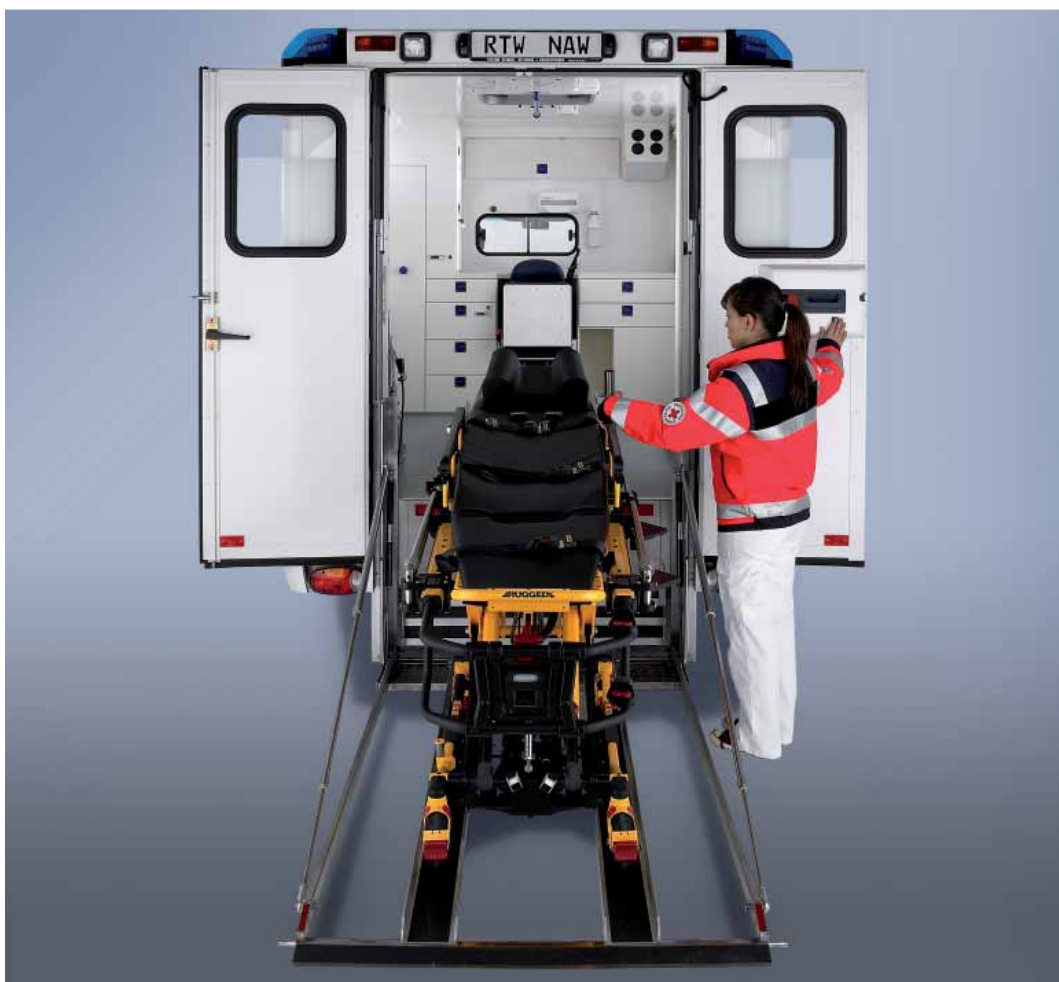

Der SYSTEM STROBEL Hecklift für Schwerlasttragen ist für ein maximales Beladegewicht von bis zu 600 kg ausgelegt.

Dies ermöglicht den Transport von adipösen Patienten. Die Beladeschienen des Hecklifts sind in ihrer Breite individuell einstellbar. Das erlaubt das Beladen mit unterschiedlichen Patienten-Transportvorrichtungen wie zum Beispiel Schwerlasttragen, normale Fahrtragen, Krankenbetten, Intensivbetten und Korbtragen

QUALITÄT DIE LEBEN RETTET



Der Hecklift ist über elektrische Hubspindeln mit nur einem Bedienschalter leicht zu handhaben und in die einzelnen Beladepositionen zu fahren



Fahren Sie den Hecklift in die untere Position, stellen Sie die Beladeschienen auf die gewünschte Breite ein. Schieben Sie die Fahrtrage auf die Schienen.



Fahren Sie den Hecklift auf die Mittelposition und schieben bzw. ziehen Sie die Fahrtrage in den Behandlungsraum des Fahrzeugs.

**SYSTEM STROBEL**  
QUALITÄT DIE LEBEN RETTET

SYSTEM STROBEL GmbH&Co. KG  
Rettungsfahrzeuge

Schafgasse 27 D-73433 Aalen-Wasseralffingen  
Tel.: +49 (0) 7361 9787-0 Fax: -77

[www.system-strobel.de](http://www.system-strobel.de)